

FEROZA DENGUE NS1 & IgG/IgM COMBO TEST

เฟโรซา เดงกี เอ็นเอสวัน แอนด์ ไอจีจี/ไอจีเอ็ม คอมโบ เทสต์


Feroza Dengue NS1 & IgG/IgM Combo Test เป็นการทดสอบเชิงคุณภาพขั้นต้น โดยใช้หลักการ immunoassay สำหรับตรวจหาแอนติบอดีของไวรัสไข้เลือดออก (IgG และ IgM) และแอนติเจนของไวรัสไข้เลือดออก NS1 ในเลือด/ซีรัม/พลาสมา




การเก็บและเตรียมตัวอย่าง

- การเก็บตัวอย่างเลือด/ซีรัม/พลาสมา ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนทางคลินิกของห้องปฏิบัติการ
- ควรทำการทดสอบทันทีหลังจากเก็บตัวอย่าง
- ห้ามวางตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลานาน
- หากต้องการเก็บในระยะยาว ควรเก็บตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิ ต่ำกว่า -20 °ซ ตัวอย่างเลือดควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิ 2-8 °ซ หากต้องการทำการทดสอบภายใน 2 วัน หลังจากการเก็บตัวอย่าง ห้ามแช่แข็งตัวอย่างเลือด
- นำตัวอย่างมาวางที่อุณหภูมิห้องก่อนทำการทดสอบ
- ตัวอย่างแช่แข็งจะต้องละลายและผสมให้เข้ากันก่อนที่จะทำการทดสอบ ไม่ควรแช่แข็งและละลายตัวอย่างซ้ำ
- แยกซีรัมหรือพลาสมาออกจากเลือดโดยเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะเม็ดเลือดแดงแตก

วิธีการทดสอบ

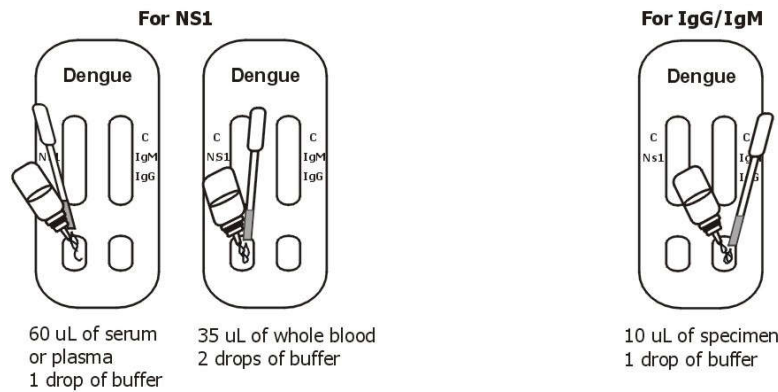

วิธีการอ่านผล

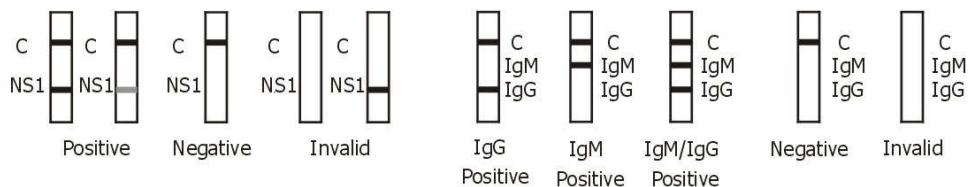

ผู้จัดจำหน่าย : บริษัท แบริเน็ต ไบโอเทค จำกัด



ฝ่ายขาย : 6 (สนธิวัฒนา 3) ซอยลาดพร้าว110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 02-1066999

โทรสาร : 02-9318340

อีเมลล์ : pbsales@brianet.com